


Auswertung und Darstellung von
Oedometerversuchen

GGU-OEDOM

VERSION 4

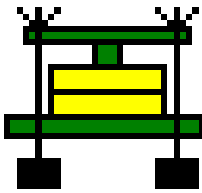

Stand der Bearbeitung: September 2008
Copyright: GGU Zentrale Verwaltung mbH, Braunschweig
Technische Umsetzung und Vertrieb: Civilserve GmbH, Steinfeld

Inhaltsverzeichnis:

1	Vorab	4
2	Lizenzschutz und Installation	4
3	Sprachwahl.....	5
4	Programmstart.....	5
5	Theoretische Grundlagen.....	6
5.1	Allgemeiner Hinweis.....	6
5.2	Auswertung Steifemodule.....	6
5.3	Auswertung Kompressionsbeiwerte.....	7
6	Erläuterung der Menüeinträge.....	9
6.1	Menütitel Datei.....	9
6.1.1	Menüeintrag "Neu".....	9
6.1.2	Menüeintrag "Laden".....	9
6.1.3	Menüeintrag "Speichern".....	9
6.1.4	Menüeintrag "Speichern unter".....	9
6.1.5	Menüeintrag "ASCII-Datei lesen".....	10
6.1.6	Menüeintrag "ASCII-Datei ausgeben".....	10
6.1.7	Menüeintrag "Drucker einstellen".....	10
6.1.8	Menüeintrag "Drucken".....	11
6.1.9	Menüeintrag "Mehrere Dateien drucken".....	13
6.1.10	Menüeintrag "Beenden".....	13
6.1.11	Menüeinträge "1,2,3,4".....	13
6.2	Menütitel Bearbeiten.....	14
6.2.1	Menüeintrag "Grunddaten".....	14
6.2.2	Menüeintrag "Versuche" (bei Auswertung über Steifemodule).....	14
6.2.3	Menüeintrag "Versuche" (bei Auswertung über Kompressionsbeiwerte).....	16
6.2.4	Menüeintrag "Versuchswerte anzeigen".....	16
6.2.5	Menüeintrag "alle Versuche löschen".....	17
6.2.6	Menüeintrag "Allgemein".....	17
6.2.7	Menüeintrag "Firma".....	17
6.3	Menütitel Ansicht.....	18
6.3.1	Menüeintrag "Einstellungen".....	18
6.3.2	Menüeintrag "aktualisieren".....	19
6.3.3	Menüeintrag "Lupe".....	20
6.3.4	Menüeintrag "Schriftart".....	20
6.3.5	Menüeintrag "Schriftgrößen".....	20
6.3.6	Menüeintrag "Stifte".....	20
6.3.7	Menüeintrag "Mini-CAD".....	21
6.3.8	Menüeintrag "Symbol- u. Statusleiste".....	21
6.3.9	Menüeintrag "Einstellungen laden".....	22
6.3.10	Menüeintrag "Einstellungen speichern".....	22

6.4	Menütitel Formblatt.....	22
6.4.1	Allgemeiner Hinweis	22
6.4.2	Menüeintrag "Blattformat"	22
6.4.3	Menüeintrag "Texte".....	22
6.4.4	Menüeintrag "Ränder"	24
6.4.5	Menüeintrag "Info zu Position"	24
6.4.6	Menüeintrag "Titel (Position ändern)".....	25
6.4.7	Menüeintrag "Drucksetzungs-Kurve".....	25
6.4.8	Menüeintrag "Steifemodul-Kurve"	25
6.4.9	Menüeintrag "Kompressions-Kurve".....	26
6.4.10	Menüeintrag "Grunddaten"	26
6.4.11	Menüeintrag "Versuchs-Werte"	26
6.4.12	Menüeintrag "Versuchs-Ergebnisse"	26
6.4.13	Menüeintrag "Symbol-Erläuterung"	26
6.4.14	Menüeintrag "Firma"	27
6.4.15	Menüeintrag "Prüfungs-Nr. usw."	27
6.4.16	Menüeintrag "Anlage und Bericht"	27
6.4.17	Menüeintrag "Protokoll"	27
6.4.18	Menüeintrag "Alle zurücksetzen"	27
6.4.19	Menüeintrag "Objekte verschieben"	28
6.5	Menütitel ?	29
6.5.1	Menüeintrag "Copyright"	29
6.5.2	Menüeintrag "Maximalwerte".....	29
6.5.3	Menüeintrag "Hilfe"	29
6.5.4	Menüeintrag "GGU-Homepage"	29
6.5.5	Menüeintrag "GGU-Support"	29
6.5.6	Menüeintrag "Was ist neu?"	29
6.5.7	Menüeintrag "Spracheinstellung"	29
7	Tipps.....	30
8	Index.....	31

1 Vorab

Das Programmsystem **GGU-OEDOM** ermöglicht die Auswertung und Darstellung von Kompressionsversuchen zur Bestimmung des Verformungsverhaltens durch Spannungsveränderungen bei verhinderter Seitendehnung sowie der Ermittlung des Steifemoduls. Alternativ zur Ermittlung des Steifemoduls kann auch eine Auswertung hinsichtlich des Kompressionsbeiwerts erfolgen.

Das Programm beinhaltet eine komfortable Dateneingabe. Das System wird permanent auf dem Bildschirm dargestellt. Jede Veränderung der Daten wird auf dem Bildschirm angezeigt, so dass eine optimale Kontrolle der Eingabedaten gewährleistet ist. Die grafische Ausgabe unterstützt die von WINDOWS zur Verfügung gestellten True-Type-Fonts, so dass ein hervorragendes Layout gewährleistet ist. Farbige Ausgabe und zahlreiche Grafikformate (BMP, TIF, JPG etc.) werden unterstützt. Über das integrierte Mini-CAD-System können auch DXF-Dateien importiert werden (siehe Handbuch "**Mini-CAD**").

Das Programm ist an einer Vielzahl von Beispielen aus der Literatur und aus der Praxis getestet worden. Fehler sind dabei nicht festgestellt worden. Dennoch kann eine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Programmsystems und des Handbuches sowie daraus resultierender Folgeschäden nicht übernommen werden.

2 Lizenzschutz und Installation

Für das Programmsystem **GGU-OEDOM** benutzen wir einen Hardware-basierenden Kopierschutz, um ein hohes Maß an Qualität zu gewährleisten.

Die mit dem Kopierschutzsystem *CodeMeter* geschützte Software ist an die Kopierschutzkomponente *CodeMeter-Stick* (Hardware zum Anschluss an den PC, "**CM-Stick**") gebunden. Durch die Art der Einbindung des Systems kann die so geschützte Software nur mit dem passenden CM-Stick betrieben werden. Durch diesen Umstand entsteht eine feste Bindung zwischen Softwarelizenz und der Kopierschutzhardware CM-Stick; die Lizenz im eigentlichen Sinne wird somit durch den CM-Stick repräsentiert. Auf Ihrem PC muss daher das Runtime Kit für den CodeMeter-Stick installiert sein.

Das Programm **GGU-OEDOM** prüft beim Start und während der Laufzeit, ob ein CM-Stick angeschlossen ist. Wenn er entfernt ist, lässt sich das Programm nicht mehr ausführen.

Zur Installation der GGU-Software und der CodeMeter-Software beachten Sie bitte den der Lieferung beiliegenden Infozettel *Installationshinweise zur GGU-Software International*.

3 Sprachwahl

GGU-OEDOM ist ein zweisprachiges Programm. Das Programm startet immer in der Sprache, in der es beendet wurde.

Ein Wechsel der Spracheinstellung ist jederzeit über den Menütitel "?" Menüeintrag "**Spracheinstellung**" (bei Einstellung Deutsch) bzw. Menüeintrag "**Language preferences**" (bei Einstellung Englisch) möglich.

4 Programmstart

Nach dem Programmstart sehen Sie auf dem Anfangsbildschirm am oberen Fensterrand zwei Menütitel:

- Datei
- ?

Nach dem Anklicken des Menütitels "**Datei**" können Sie entweder über den Menüeintrag "**Laden**" einen bereits bearbeiteten Versuch laden oder über "**Neu**" einen neuen Versuch eingeben. Wenn Sie auf "**Datei / Neu**" klicken, müssen Sie zunächst in einer Dialogbox die Art der Versuchsauswertung auswählen. Danach wird ein leeres Formblatt für die gewählte Versuchsart auf dem Bildschirm dargestellt. Am oberen Fensterrand erscheinen jetzt fünf Menütitel:

- Datei
- Bearbeiten
- Ansicht
- Formblatt
- ?

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die so genannten Menüeinträge herunter, über die Sie alle Programmfunktionen erreichen.

Das Programm arbeitet nach dem Prinzip *What you see is what you get*. Das bedeutet, dass die Bildschirmdarstellung weitgehend der Darstellung auf dem Drucker entspricht. Bei einer konsequenten Verwirklichung dieses Prinzips müsste nach jeder Änderung, die Sie vornehmen, vom Programm der Bildschirminhalt aktualisiert werden. Da das bei komplexem Bildschirminhalt jedoch einige Sekunden dauern kann, wird dieser Neuaufbau des Bildschirminhalts vom Programm **GGU-OEDOM** aus Gründen der Effizienz nicht bei allen Änderungen vorgenommen.

Wenn Sie den Bildschirminhalt aktualisieren wollen, dann drücken Sie entweder die Taste **[F2]** oder die Taste **[Esc]**. Die Taste **[Esc]** setzt zusätzlich die Bildschirmdarstellung auf Ihren aktuellen Bildzoom zurück, der voreingestellt auf 1,0 steht, was einem DIN A4-Blatt entspricht.


5 Theoretische Grundlagen

5.1 Allgemeiner Hinweis

Bei der Auswertung eines Versuchs kann unterschieden werden zwischen:

- Auswertung Steifemodule
- Auswertung Kompressionsbeiwerte

Sie können über den Menüeintrag "**Datei / Neu**" die Art der Auswertung vorgeben:

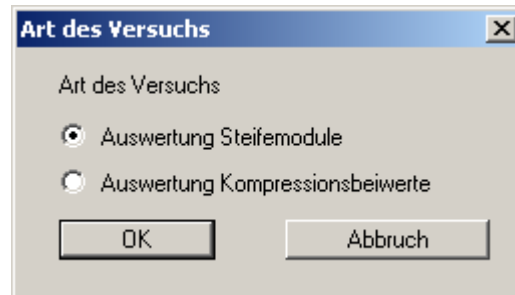

5.2 Auswertung Steifemodule

Die Standardauswertung erfolgt über Steifemodule. Die Steifemodule werden berechnet aus:

$$E_S = (\sigma_i - \sigma_{i-1}) / (s_i - s_{i-1}) * h$$

σ_i = Spannung Laststufe i

σ_{i-1} = Spannung Laststufe i - 1

s_i = Setzung Laststufe i

s_{i-1} = Setzung Laststufe i - 1

h = Probenhöhe bei Laststufe i - 1

Wenn Sie in der Dialogbox des Menüeintrages "**Bearbeiten / Versuche**" den Schalter "**Berechnung Steifemodule mit Einbauhöhe**" aktivieren, wird für "h" die Anfangshöhe (= Einbauhöhe) eingesetzt. Dies ist aber im Allgemeinen unüblich.

Die grafische Darstellung der Versuchsergebnisse ist in Abbildung 1 dargestellt.

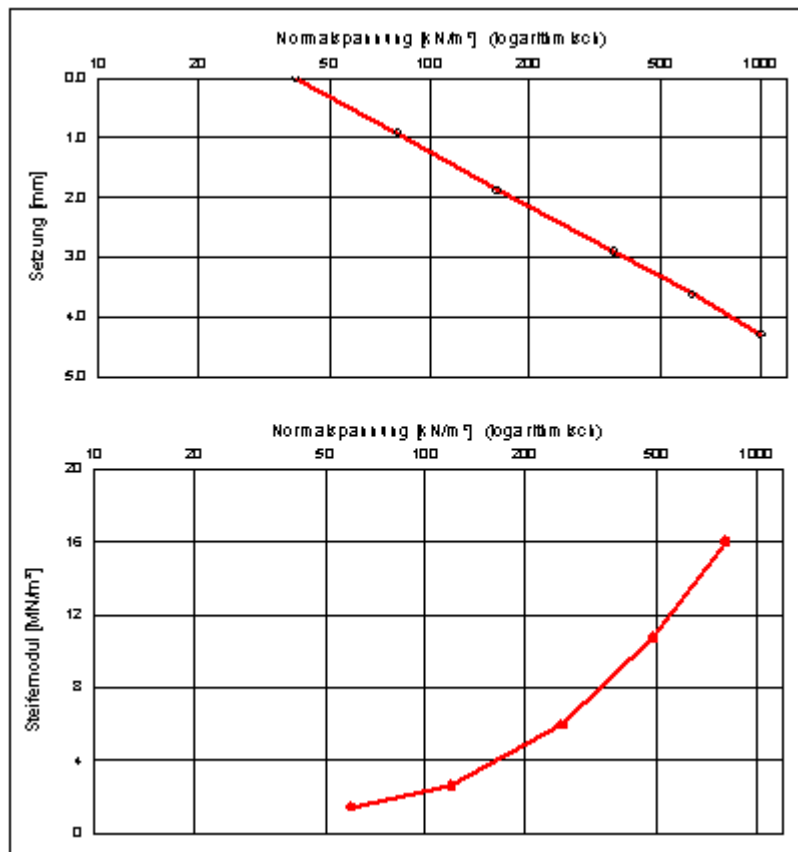


Abbildung 1 Auswertung Steifemodule

5.3 Auswertung Kompressionsbeiwerte

Bei dieser Auswertung werden neben den Spannungen und Setzungen der einzelnen Laststufen folgende Eingabedaten und Beziehungen verwendet:

Eingabedaten:

h_0 = Einbauhöhe
 A = Probenfläche
 m_f = Feuchtmasse
 ρ_s = Korndichte
 w_0 = Einbauwassergehalt

Beziehungen:

Masse Feststoff $m_s = m_f / (1.0 + w_0)$
 Festvolumen $V_s = m_s / \rho_s$
 Porenvolumen $V_w = A \cdot h_0 - V_s$
 Porenzahl $e = V_w / V_s$

$$\text{Kompressionsbeiwert } C_c = (e_i - e_{i-1}) * \ln(\sigma_i / \sigma_{i-1})$$

- e_i = Porenzahl Laststufe i
- e_{i-1} = Porenzahl Laststufe i - 1
- σ_i = Spannung Laststufe i
- σ_{i-1} = Spannung Laststufe i - 1

Die grafische Darstellung der Versuchsergebnisse ist in Abbildung 2 dargestellt.

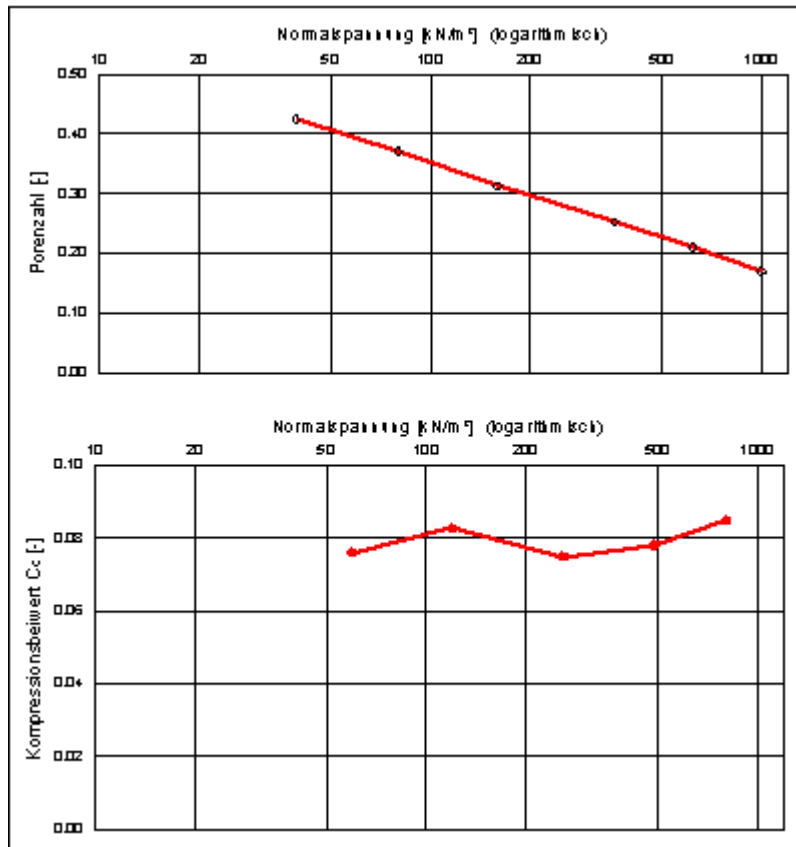


Abbildung 2 Auswertung Kompressionsbeiwerte

Im Gegensatz zur Auswertung mit Steifemodulen wird im oberen Diagramm die Porenzahl anstatt der Setzung dargestellt. Im unteren Diagramm erfolgt eine Auftragung der Kompressionsbeiwerte anstatt der Steifemodule.


Eine Auswertung mit Kompressionsbeiwerten macht überwiegend bei erstkonsolidierten Böden Sinn, wenn in halblogarithmischer Darstellung die Porenzahl sich mit zunehmender Spannung linear verändert. In diesem Fall ist nämlich der Kompressionsbeiwert konstant. Dann kann z.B. eine Zeitsetzungsberechnung mit Kompressionsbeiwerten sinnvoll sein. Das beherrscht z.B. das Programm **GGU-CONSOLIDATE**.

6 Erläuterung der Menüeinträge

6.1 *Menütitel Datei*

6.1.1 Menüeintrag "Neu"

Um einen neuen Versuch einzugeben, entscheiden Sie zunächst in einer Dialogbox über die Art der Versuchsauswertung, wobei eine Auswertung über Steifemodule der Standardfall ist.

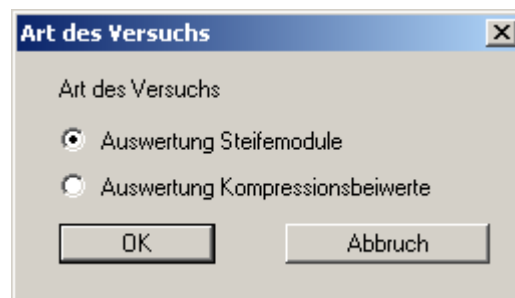

Bei einem Wechsel der Auswertungsart können bereits eingegebene Versuchsdaten übernommen werden.

6.1.2 Menüeintrag "Laden"

Sie können eine Datei mit Versuchsdaten laden, die Sie im Rahmen einer vorherigen Sitzung erzeugt und abgespeichert haben, und an diesen Daten anschließend Veränderungen vornehmen.

6.1.3 Menüeintrag "Speichern"


Sie können die im Rahmen des Programms eingegebenen oder geänderten Daten in eine Datei speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder verfügbar zu haben oder um sie zu archivieren. Die Daten werden ohne Abfrage unter dem Namen der aktuell geöffneten Datei abgespeichert.

6.1.4 Menüeintrag "Speichern unter"

Sie können die im Rahmen des Programms eingegebenen Daten in eine bestehende oder neue Datei d.h. unter einem neuen Dateinamen speichern. Es ist sinnvoll, als Dateiergung hier ".dsv" vorzugeben, da unter dem Menüeintrag "**Datei / Laden**" aus Gründen der Übersichtlichkeit eine Dateiauswahlbox erscheint, die nur Dateien mit dieser Endung anzeigt. Wenn Sie beim Speichern keine Endung vergeben, wird automatisch die Endung ".dsv" gewählt.

6.1.5 Menüeintrag "ASCII-Datei lesen"

Sie haben unter diesem Menüeintrag die Möglichkeit; ASCII-Dateien einzulesen. Sie haben beim Einlesen die Wahl zwischen Dateien der Firmen "**Wille**", "**Micronic**" und "**Straßentest**".

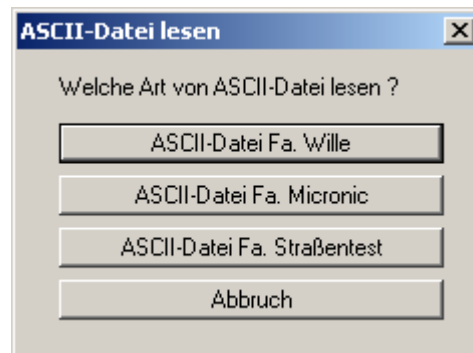

Nachdem Sie die entsprechende Firma ausgewählt haben, können Sie die entsprechenden Daten automatisch einlesen. Falls Sie die Daten einer anderen Firma einlesen wollen, setzen Sie sich bitte mit **CIVILSERVE** (info@civilserve.com) in Verbindung.

6.1.6 Menüeintrag "ASCII-Datei ausgeben"

Sie können Ihre Versuchsdaten in eine ASCII-Datei ausgeben, um sie mit anderen Programmen bearbeiten zu können.


6.1.7 Menüeintrag "Drucker einstellen"

Sie können gemäß den WINDOWS-Konventionen die Einstellung des Druckers ändern (z.B. Wechsel zwischen Hoch- und Querformat) bzw. den Drucker wechseln.

6.1.8 Menüeintrag "Drucken"

Sie können ihr Ausgabeformat in einer Dialogbox auswählen. Dabei haben Sie die folgenden Möglichkeiten:


- **"Drucker"**
bewirkt die Ausgabe der aktuellen Bildschirmgrafik auf dem WINDOWS-Standarddrucker oder auf einem anderen, im Menüeintrag **"Datei / Drucker einstellen"** ausgewählten Drucker. Sie können aber auch direkt in der folgenden Dialogbox über den Knopf **"Drucker einstellen / wechseln"** einen anderen Drucker auswählen.

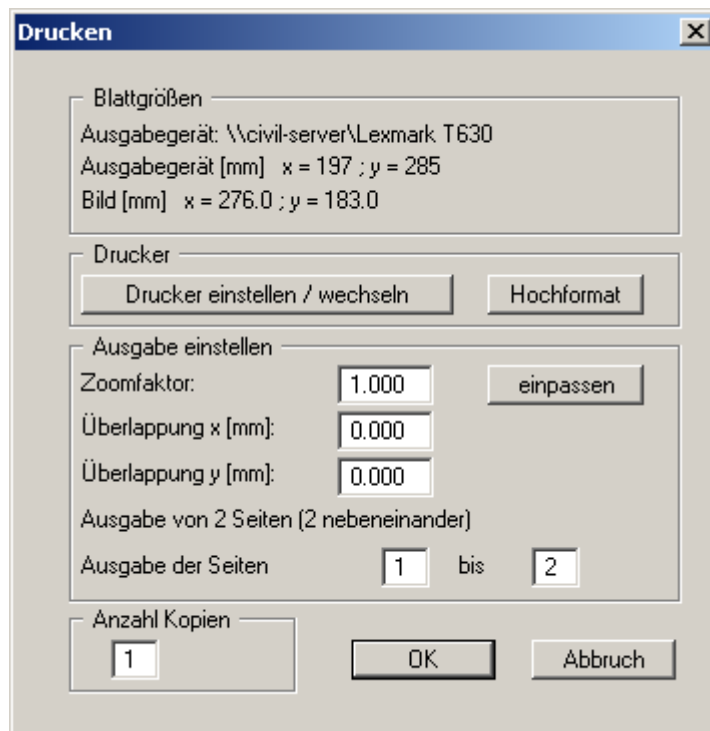

Im oberen Teil der Dialogbox werden die maximalen Abmessungen angegeben, die der ausgewählte Drucker beherrscht. Darunter können die Abmessungen der auszugebenden Zeichnung abgelesen werden. Wenn die Zeichnung größer als das Ausgabeformat des Druckers ist, wird die Zeichnung auf mehrere Blätter gedruckt (im obigen Beispiel 4). Um die Zeichnung später besser zusammenfügen zu können, besteht die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Teilausgaben der Zeichnung eine Überlappung in x- und y-Richtung einzustellen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, einen kleineren Zoomfaktor zu wählen, der die Ausgabe eines einzelnen Blattes sicherstellt (Knopf **"einpassen"**). Anschließend kann dann auf einem Kopierer wieder auf das Originalformat vergrößert werden, um die Maßstabstreue zu sichern. Außerdem kann die Anzahl der Kopien eingegeben werden.

- **"DXF-Datei"**
ermöglicht die Ausgabe der Grafik in eine DXF-Datei. DXF ist ein sehr verbreitetes Datenformat, um Grafiken zwischen unterschiedlichen Anwendungen auszutauschen.

- **"GGUCAD-Datei"**
ermöglicht die Ausgabe des aktuellen Bildschirminhalts in eine Datei, um mit dem Programm GGUCAD die Zeichnung weiterzuverarbeiten. Gegenüber der Ausgabe als DXF-Datei hat das den Vorteil, dass keinerlei Qualitätsverluste hinsichtlich der Farbübergabe beim Export zu verzeichnen sind.
- **"Zwischenablage"**
Der aktuelle Bildschirminhalt wird in die WINDOWS-Zwischenablage kopiert. Von dort aus kann er zur weiteren Bearbeitung in andere WINDOWS-Programme, z.B. eine Textverarbeitung, übernommen werden. Für den Import in ein anderes WINDOWS-Programm muss man im Allgemeinen dort den Menüeintrag "*Bearbeiten / Einfügen*" wählen.
- **"Metadatei"**
Eine Metadatei ermöglicht die Ausgabe des aktuellen Bildschirminhalts in eine Datei, um im Rahmen eines anderen Programms die Zeichnung weiterzuverarbeiten. Die Ausgabe erfolgt im sogenannten EMF-Format (Enhanced Metafile-Format), das standardisiert ist. Die Verwendung des Metadatei-Formats garantiert die bestmögliche Qualität bei der Übertragung der Grafik.

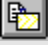
Wenn Sie das Symbol "**Bereich kopieren/drucken**"  aus der Symbolleiste des Programms wählen, können Sie auch Teilbereiche der Grafik in die Zwischenablage transportieren oder als EMF-Datei abspeichern. Alternativ können Sie den markierten Bereich direkt auf Ihrem Drucker ausdrucken.

Über das Programmmodul "**Mini-CAD**" können Sie auch entsprechende EMF-Dateien, die von anderen GGU-Programmen erzeugt wurden, in Ihre Grafik einbinden.

- **"MiniCAD"**
ermöglicht die Ausgabe der Grafik in eine Datei, die in jedem anderen GGU-Programm mit dem entsprechenden MiniCAD-Modul eingelesen werden kann.
- **"GGUMiniCAD"**
ermöglicht die Ausgabe des aktuellen Bildschirminhalts in eine Datei, um die Zeichnung im Programm GGUMiniCAD weiterzuverarbeiten.
- **"Abbruch"**
Die Aktion "**Drucken**" wird abgebrochen.

6.1.9 Menüeintrag "Mehrere Dateien drucken"

Wenn Sie mehrere mit dem Programm erstellte Anlagen hintereinander ausdrucken möchten, wählen Sie diesen Menüeintrag. Sie erhalten die folgende Dialogbox:

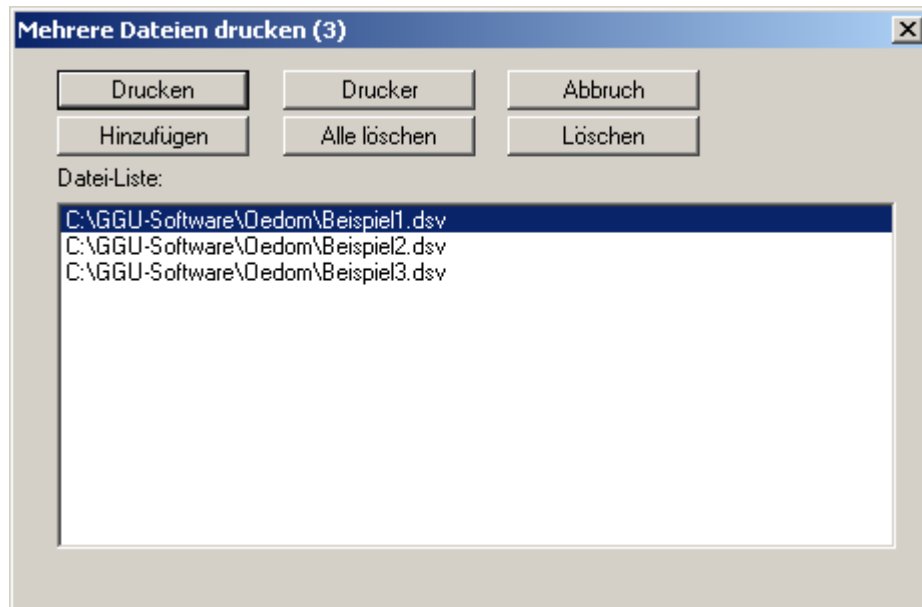

Über "**Hinzufügen**" wählen Sie die gewünschten Dateien aus und stellen sie in einer Liste zusammen. Die Anzahl der Dateien wird in der Kopfzeile der Dialogbox angezeigt. Über "**Löschen**" können Sie einzelne Dateien, die Sie vorher in der Liste markiert haben, löschen. Eine neue Liste können Sie nach Anwahl des Knopfes "**Alle löschen**" erstellen. Die Auswahl des gewünschten Druckers und die Druckereinrichtung erreichen Sie über den Knopf "**Drucker**".

Den Ausdruck starten Sie über den Knopf "**Drucken**". In der Dialogbox, die anschließend erscheint, können Sie weitere Einstellungen für die Druckausgabe treffen, z.B. Anzahl der Kopien. Diese Einstellungen werden auf alle in der Liste stehenden Dateien angewendet.

6.1.10 Menüeintrag "Beenden"

Sie können nach einer Sicherheitsabfrage das Programm beenden.


6.1.11 Menüeinträge "1,2,3,4"

Die Menüeinträge "**1,2,3,4**" zeigen Ihnen die letzten vier bearbeiteten Dateien an. Durch Anwahl eines dieser Menüeinträge wird die aufgeführte Datei geladen. Falls Sie Dateien in anderen Verzeichnissen als dem Programmverzeichnis abgelegt haben, sparen Sie sich damit das manchmal mühselige *Hangeln* durch die verschiedenen Unterverzeichnisse.

6.2 Menütitel Bearbeiten

6.2.1 Menüeintrag "Grunddaten"

Dieser Menüeintrag ist nur bei einer Versuchsauswertung über Steifemodule anwählbar. Es erscheint folgende Dialogbox:

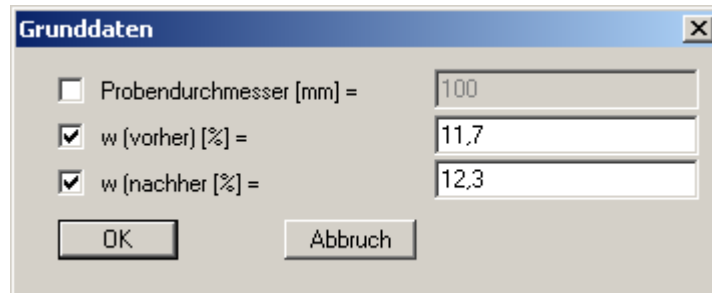


Parameter	Value
Probendurchmesser [mm] =	100
w (vorher) [%] =	11,7
w (nachher) [%] =	12,3

In die Datenfelder können Sie den Probendurchmesser sowie die Wassergehalte vor und nach Versuch eingeben. Diese Werte werden in einer Tabelle auf dem Formblatt dargestellt, dienen aber nicht der Versuchsauswertung. Eine Änderung der Texte oder Ausblendung wie in der obigen Dialogbox das Eingabefeld "**Probendurchmesser [mm] =**" ist über den Menüeintrag "**Formblatt / Texte**" Knopf "**Tabelle Grunddaten**" möglich (siehe Abschnitt 6.4.3).

6.2.2 Menüeintrag "Versuche" (bei Auswertung über Steifemodule)


Wenn Sie die Auswertung über *Steifemodule* gewählt haben, erhalten Sie nach Anklicken dieses Menüeintrags die folgende Dialogbox:

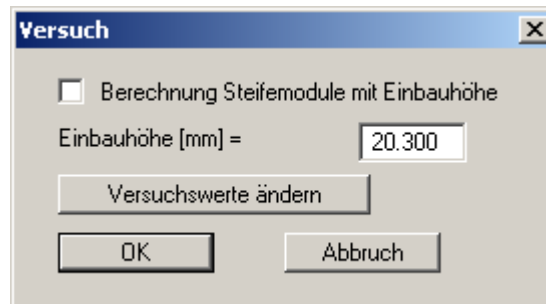

Option	Value
Berechnung Steifemodule mit Einbauhöhe	<input type="checkbox"/>
Einbauhöhe [mm] =	20.300

Es bestehen unterschiedliche Auffassungen darüber, ob die Steifemodule bei jeder Laststufe mit der Einbauhöhe berechnet werden müssen oder ob jeweils die Höhe vor Beginn der Laststufe einzusetzen ist. Über den Schalter "**Berechnung Steifemodule mit Einbauhöhe**" können Sie Ihre persönliche Einstellung dazu umsetzen.

Die zentrale Dateneingabe erfolgt über den Knopf "**Versuchswerte ändern**". Beim obigen Beispiel erscheint die folgende Dialogbox:

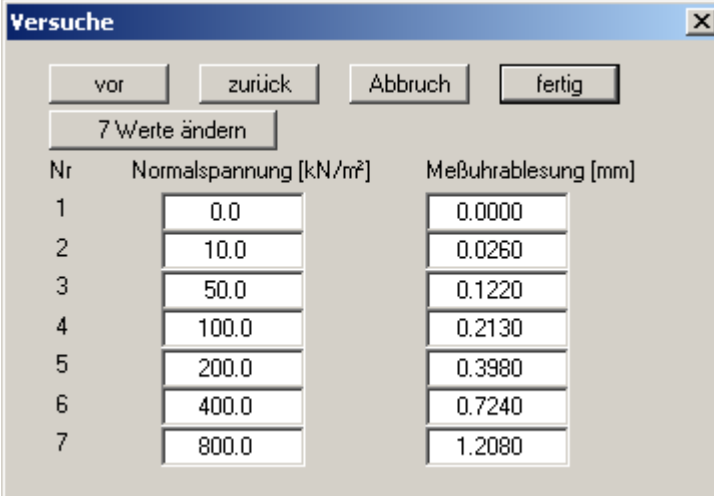

The dialog box titled "Versuche" contains a table with 7 rows of data. At the top, there are four buttons: "vor", "zurück", "Abbruch", and "fertig". Below these is a button labeled "7 Werte ändern". The table has three columns: "Nr", "Normalspannung [kN/m²]", and "Meßuhrablesung [mm]".

Nr	Normalspannung [kN/m²]	Meßuhrablesung [mm]
1	0.0	0.0000
2	10.0	0.0260
3	50.0	0.1220
4	100.0	0.2130
5	200.0	0.3980
6	400.0	0.7240
7	800.0	1.2080

In dieser Dialogbox werden die für die Berechnung der Verformungen und Steifemodule relevanten Versuchsergebnisse, die Normalspannung [kN/m²] und die dazugehörige Messuhrablesung [mm] eingetragen.

Im angegebenen Beispiel sind bereits 7 Wertepaare eingegeben. Nach Drücken des Knopfes "**7 Werte ändern**" öffnet sich eine Dialogbox, in der Sie die gewünschte Anzahl von Wertepaaren eingeben können. Sind noch keine Werte vorhanden (neuer Versuch), steht in der Box eine "**0**". Durch Vergrößern der Zahl werden Wertepaare hinzugefügt, durch Verkleinern der Anzahl können Sie vorhandene Wertepaare am Ende der Tabelle löschen.

Es werden maximal 12 Wertepaare dargestellt. Sind mehr Wertepaare vorhanden, können Sie mit "**vor**" und "**zurück**" in der Liste blättern. Über "**Abbruch**" gelangen Sie in die vorhergehende Dialogbox zurück, ohne Änderungen zu speichern. Nach Klicken auf den Knopf "**fertig**" werden Ihre Eingaben übernommen.

6.2.3 Menüeintrag "Versuche" (bei Auswertung über Kompressionsbeiwerte)

Bei einer Auswertung über *Kompressionsbeiwerte* erhalten Sie die folgende Dialogbox:

Versuch

Kompressionsbeiwert C_c mit Logarithmus zur Basis 10

Einbauhöhe [mm] = 32.500

Probenfläche [cm²]: 25.000

Feuchtmasse [g]: 151.830

Korndichte [g/cm³]: 2.674

Einbauwassergehalt [-]: 0.347

Versuchswerte ändern

OK Abbruch

Sie geben hier zunächst die Grunddaten des Versuchs gemäß den theoretischen Grundlagen in Abschnitt 0 ein und können anschließend über den Knopf "**Versuchswerte ändern**" analog zur Dialogbox bei einer Auswertung über Steifemodule (siehe Abschnitt 6.2.2) Ihre Versuchsdaten eingeben bzw. ändern.

6.2.4 Menüeintrag "Versuchswerte anzeigen"

Es erscheint eine Dialogbox, in der die eingegebenen Versuchsdaten mit den daraus errechneten Setzungen und *Steifemodulen* dargestellt sind.

Versuchswerte

vor zurück fertig

Gehe zu Nr.: 1

Nr	sigma [kN/m ²]	Meßuhr [mm]	s [mm]	Es [MN/m ²]
1	0.0	0.000	0.000	7.81
2	10.0	0.026	0.026	8.45
3	50.0	0.122	0.122	11.09
4	100.0	0.213	0.213	10.86
5	200.0	0.398	0.398	12.21
6	400.0	0.724	0.724	16.18
7	800.0	1.208	1.208	

Mit "**vor**" und "**zurück**" kann in der Liste geblättert werden. Durch Eingabe der Nummer und Klicken auf "**Gehe zu Nr.:**" gelangt man direkt zur entsprechenden Versuchsnummer.

Bei einer Auswertung über *Kompressionsbeiwerte* erscheint anstelle der Steifemodule E_s eine Spalte der Kompressionsbeiwerte C_c in der Dialogbox.

6.2.5 Menüeintrag "alle Versuche löschen"

Es werden nach einer Sicherheitsabfrage alle Einzelversuche gelöscht. Sie können anschließend über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Versuche**" einen neuen Versuch eingeben (siehe Abschnitt 6.2.2 bzw. Abschnitt 6.2.3).

6.2.6 Menüeintrag "Allgemein"

Nach Anwahl dieses Menüeintrags können Sie allgemeine Daten wie Bezeichnung des Vorhabens, Berichtsnummer, Anlagennummer, usw. eingeben. Diese Daten werden in den dafür vorgesehenen Elementen des Ausgabeblattes dargestellt.

Vorhaben (1. Zeile):	Musterdorf
Vorhaben (2. Zeile):	Musterstraße
Bearbeiter:	Buß
Bearbeitungsdatum:	30.11.1993
Prüfungsnummer:	
Entnahmestelle:	Achse A - 7
Tiefe:	Planum
Bodenart:	Ton, schluffig
Art der Entnahme:	ungestört
Probe entnommen am:	29.11.1993
Bericht:	999/2000
Anlage:	1


Die in der Dialogbox markierten Texte erscheinen ebenfalls auf dem Ausgabeblatt. Eine Änderung oder Ausblendung wie in der obigen Dialogbox das Eingabefeld "**Prüfungsnummer:**" ist über den Menüeintrag "**Formblatt / Texte**" Knopf "**Formblatt**" möglich (siehe Abschnitt 6.4.3).

6.2.7 Menüeintrag "Firma"

Sie können Ihre Firmenadresse hier in vier Zeilen eingeben. Die entsprechenden Zeilen werden im Formular links oben eingetragen.

6.3.1 Menüeintrag "Einstellungen"

Dieser Menüeintrag ermöglicht Ihnen die Einstellung der grafischen Darstellung. Bei der Auswertung über *Steifemodule* erscheint die im Folgenden erläuterte Dialogbox. Bei einer Auswertung über *Kompressionsbeiwerte* sind die Bereiche der Dialogbox den entsprechenden Auswertungsdiagrammen angepasst.

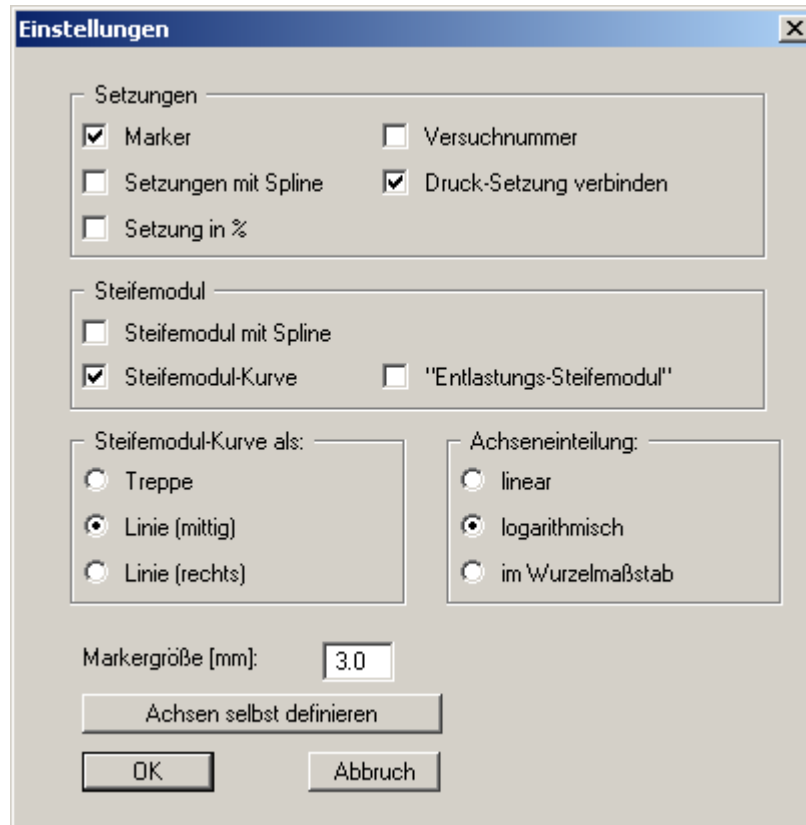

- Bereich "**Setzungen**":
Durch Aktivierung des entsprechenden Schalters legen Sie fest, ob an den Messpunkten Marker oder Versuchsnummern eingezeichnet werden. Die Markergröße bzw. Schriftgröße der Versuchsnummern ist einstellbar. Wenn keiner der beiden Schalter angewählt ist, werden die Messwerte nicht markiert.


Aktivieren Sie den Schalter "**Druck-Setzung verbinden**", um eine Kurvendarstellung zu erhalten. Die Kurve kann als Spline, die Setzungen wahlweise in [mm] oder in [%] dargestellt werden. Bei einer Auswertung über *Kompressionsbeiwerte* können Sie anstelle der Setzungen alternativ die Porenzahl darstellen lassen.
- Bereich "**Steifemodul**":
Wenn Sie den Schalter "**Steifemodul-Kurve**" aktiviert haben, erfolgt die Darstellung der Kurve, auch hier wahlweise mit oder ohne Spline. Zusätzlich können Sie die Entlastung darstellen lassen. Bei einer Auswertung über *Kompressionsbeiwerte* erscheint hier der Bereich "**Kompressions-Beiwert**" mit den gleichen Auswahlmöglichkeiten wie für die Steifemodul-Darstellung.

- Bereich "**Steifemodul-Kurve als:**":
Sie können zwischen den verschiedenen Darstellungsformen "**Treppe**", "**Linie (mittig)**" und "**Linie (rechts)**" wählen. Dabei wird die Position des Markers in der Grafik entsprechend angepasst. Bei einer Auswertung über **Kompressionsbeiwerte** ist hier entsprechend die Einstellung der Kompressions-Kurve möglich.
- Bereich "**Achseinteilung:**"
Für die Darstellung der Normalspannung können Sie in diesem Bereich die gewünschte Achseinteilung wählen. Die gewählte Darstellungart gilt immer für alle dargestellten Diagramme.
- Knopf "**Achsen selbst definieren**"
Bei der grafischen Darstellung der Auswertungsdiagramme wählt das Programm automatisch eine sinnvolle Skalierung der Achsen. Wenn Sie diesen Knopf anwählen, erhalten Sie ein Dialogbox, in der Sie zunächst den Schalter "**Nachfolgenden Achsenwert verwenden**" aktivieren müssen. Anschließend können Sie die gewünschten minimalen und maximalen Achsenwerte eingeben.

6.3.2 Menüeintrag "aktualisieren"

Das Programm arbeitet nach dem Prinzip *What you see is what you get*. Das bedeutet, dass die Bildschirmdarstellung weitgehend der Darstellung auf dem Drucker entspricht. Bei einer konsequenten Verwirklichung dieses Prinzips müsste nach jeder Änderung, die Sie vornehmen, vom Programm der Bildschirminhalt aktualisiert werden. Da das bei komplexem Bildschirminhalt jedoch einige Sekunden dauern kann, wird dieser Neuaufbau des Bildschirminhalts aus Gründen der Effizienz nicht bei allen Änderungen vorgenommen.

Wenn z.B. durch die Lupenfunktion (siehe unten) nur Teile des Bildes sichtbar sind, können Sie mit diesem Menüeintrag wieder eine Vollbilddarstellung erreichen.

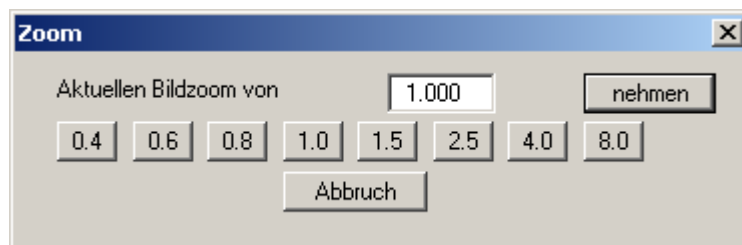

Sie können einen beliebigen Zoomfaktor zwischen 0,4 und 8,0 in das Eingabefeld eintragen. Durch anschließendes Klicken auf "**nehmen**" verlassen Sie die Box, die Eingabe wird als aktueller Faktor übernommen. Beim Klicken auf die Knöpfe "**0.4**", "**0.6**" usw. wird der angewählte Faktor direkt übernommen und die Dialogbox verlassen.

Wesentlich einfacher erreichen Sie eine Vollbilddarstellung jedoch mit der **[Esc]**-Taste. Das Drücken der **[Esc]**-Taste bewirkt eine Vollbilddarstellung mit dem unter diesem Menüeintrag eingestellten Zoomfaktor. Mit der Taste **[F2]** erreichen Sie einen Neuaufbau des Bildschirms, ohne dass Koordinaten und Zoomfaktor verändert werden.

6.3.3 Menüeintrag "Lupe"

Sie können durch Anklicken von zwei diagonal gegenüberliegenden Punkten einen Bildschirm-ausschnitt vergrößern, um Details besser erkennen zu können. Eine Infobox informiert Sie über Aktivierung und Möglichkeiten der Lupenfunktion.

6.3.4 Menüeintrag "Schriftart"


Mit diesem Menüeintrag können Sie auf einen anderen True-Type-Font umschalten. In der Dialogbox werden alle zur Verfügung stehenden True-Type-Fonts angezeigt.

6.3.5 Menüeintrag "Schriftgrößen"

Mit diesem Menüeintrag können Sie die Schriftgröße in [mm] für verschiedene Eingabebereiche einstellen.

6.3.6 Menüeintrag "Stifte"

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind für die grafische Darstellung der verschiedenen Linien unterschiedliche Farben voreingestellt.

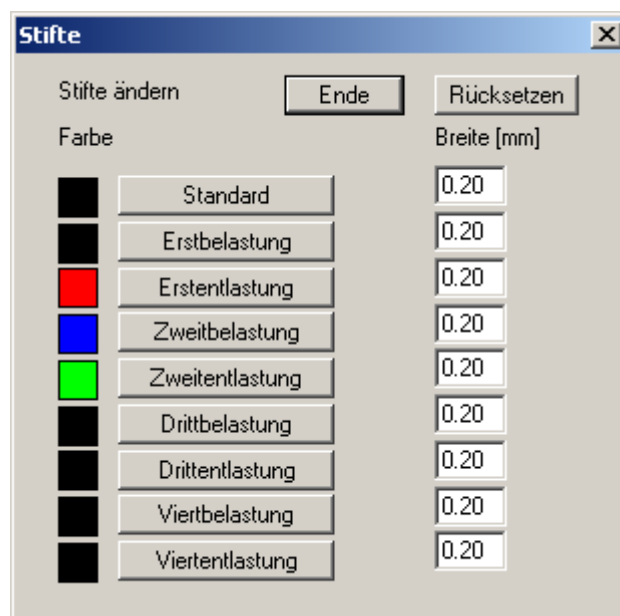

Für die Linien der verschiedenen Belastungsstufen können Sie die Stiftbreiten ändern und nach Klicken auf den entsprechenden Knopf die Stiftfarben anpassen.

Mit der "Standard"-Farbe werden z.B. die bei "Bearbeiten/Firma" und "Bearbeiten/Allgemein" eingegebenen Daten dargestellt. Mit "Rücksetzen" stellen Sie die Grundeinstellung für die Stiftfarben wieder her.

Bei der grafischen Ausgabe von Farben auf *Einfarbdruckern* (z.B. Laserdruckern) werden Farben durch eine äquivalente Grauschattierung ersetzt. Bei sehr hellen Farben sind dann entsprechende Grafikelemente auf dem Drucker kaum noch erkennbar. In entsprechenden Fällen ist eine Änderung der Farbeinstellung auf dunklere Farben sinnvoll.

6.3.7 Menüeintrag "Mini-CAD"

Mit diesem Menüeintrag können Sie Ihre Zeichnung frei beschriften sowie mit zusätzlichen Linien, Kreisen, Polygonen und Grafiken (z.B. Dateien im Format BMP, JPG, PSP, TIF etc.) versehen. Es erscheint ein Popupmenü, dessen Symbole und Funktionen im beiliegenden Handbuch "Mini-CAD" näher erläutert sind.

6.3.8 Menüeintrag "Symbol- u. Statusleiste"

Nach dem Programmstart erscheint unter der Programm-Menüleiste eine horizontale Symbolleiste. Wenn Sie lieber mit einem mehrspaltigen Popupfenster arbeiten, können Sie unter diesem Menüeintrag die entsprechenden Veränderungen vornehmen. Die Smarticons können auch ausgeblendet werden.

Am unteren Rand des Programmfensters ist eine Statusleiste vorhanden, aus der Sie verschiedene Informationen entnehmen können. Auch die Statusleiste kann ausgeblendet werden. Die Einstellungen werden unter anderem in die Datei "GGU-OEDOM.alg" übernommen (siehe Menüeintrag "Ansicht / Einstellungen speichern") und sind dann nach dem nächsten Programmstart wieder aktiv.

Durch Anklicken dieser Symbole (Smarticons) können Sie wesentliche Programmfunktionen direkt erreichen. Die Bedeutung der Smarticons erscheint als Textfeld, wenn Sie mit der linken Maustaste etwas über dem entsprechenden Symbol verweilen. Einige Symbolfunktionen können nicht über normale Menütitel und Menüeinträge angerufen werden.



"entzoomen"

Über dieses Symbol erreichen Sie wieder eine Vollbilddarstellung, wenn Sie zuvor in das Bild gezoomt hatten.



"Zoom (-)" / "Zoom (+)"

Mit diesen Lupenfunktionen können Sie den Teil des Bildes, den Sie mit der linken Maustaste anklicken, verkleinern oder vergrößern.



"Rückgängig Objekt verschieben"

Wenn Sie zuvor die Position oder Größe eines Formblattelementes verändert haben ([F11] oder "Formblatt / Objekte verschieben"), können Sie über dieses Symbol die letzte Änderung rückgängig machen.



"Wiederherstellen Objekt verschieben"

Wenn Sie zuvor eine Änderung rückgängig gemacht haben, können Sie hierüber die Änderung wiederherstellen.



"Bereich kopieren/drucken"

Wenn Sie nur Teile der Grafik kopieren möchten, um sie z.B. in Ihren Berichtstext einzufügen, können Sie dieses Symbol anklicken. Sie erhalten eine Info über die Funktion und können jetzt einen Bereich markieren, der in die Zwischenablage kopiert oder in eine Datei gespeichert wird. Alternativ können Sie den markierten Bereich direkt auf Ihrem Drucker ausdrucken.

6.3.9 Menüeintrag "Einstellungen laden"

Sie können eine Datei ins Programm laden, die im Rahmen des Menüeintrags "**Ansicht / Einstellungen speichern**" abgespeichert wurde. Es werden dann nur die entsprechenden Einstellungen aktualisiert.

6.3.10 Menüeintrag "Einstellungen speichern"

Einige Einstellungen in den unter dem Menütitel "**Ansicht**" aufgeführten Menüeinträgen und auch Ihre Eingaben im Menüeintrag "**Bearbeiten / Firma**" können in einer Datei abgespeichert werden. Wenn Sie diese Datei unter dem Namen "**GGU-OEDOM.alg**" auf der gleichen Ebene wie das Programm abspeichern, werden diese Daten beim nächsten Programmstart automatisch eingeladen und müssen nicht von neuem eingegeben werden.

6.4 Menütitel Formblatt

6.4.1 Allgemeiner Hinweis


Das Formblatt kann von Ihnen frei gestaltet werden. Es stehen Ihnen je nach gewählter Auswertungsart verschiedene Tabellen mit Versuchsdaten und Versuchsergebnissen sowie die unterschiedlichen Auswertungsdiagramme, beispielsweise Drucksetzungs-Kurve oder Steifemodul-Kurve, zur Verfügung. Je nachdem, welche Diagramme Sie darstellen möchten, wählen Sie für Ihr Ausgabeblatt ein A4- oder A3-Format und arrangieren Ihre Tabellen und Diagramme nach Ihren Vorstellungen.

6.4.2 Menüeintrag "Blattformat"

Beim Programmstart ist standardmäßig ein DIN A4-Blatt im Hochformat eingestellt. In der Dialogbox können Sie das Blattformat Ihren Bedürfnissen anpassen.

6.4.3 Menüeintrag "Texte"

In der Dialogbox dieses Menüeintrages können Sie die standardmäßige Beschriftung einiger Formblattelemente verändern. Unter anderem legen Sie hier die Bezeichnung Ihres Formblattes fest. Sie erhalten zunächst eine Auswahlbox, in der Sie die verschiedenen Bereiche über entsprechend beschriftete Knöpfe zur Bearbeitung auswählen können.

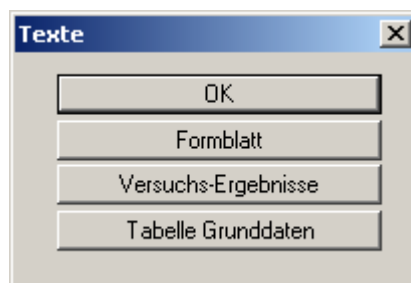

Nach Klicken auf den Knopf "**Formblatt**" erhalten Sie die folgende Dialogbox:

The dialog box titled "Texte" contains the following fields and options:

- Überschrift 1: Druck-Setzungs-Versuch
- Überschrift 2: [Empty]
- Bericht: Bericht:
- Anlage: Anlage:
- Zeile 1: Prüfungsnummer:
- Zeile 2: Entnahmestelle:
- Zeile 3: Tiefe:
- Zeile 4: Bodenart:
- Zeile 5: Art der Entnahme:
- Zeile 6: Probe entnommen am:

Buttons: OK, Abbruch, zurücksetzen

Ihre Eingaben in den Zeilen 1 bis 6 in der obigen Dialogbox ebenso wie die Eingaben unter "**Bericht:**" und "**Anlage:**" sind zugleich die Bezeichnungen der Eingabefelder in der Dialogbox des Menüeintrags "**Barbeiten / Allgemein**". Wenn Sie in der obigen Dialogbox Zeilen deaktivieren, werden die entsprechenden Eingabefelder in der Dialogbox des Menüeintrags "**Barbeiten / Allgemein**" ebenfalls deaktiviert (siehe Abschnitt 6.2.6). Mit dem Knopf "**zurücksetzen**" stellen Sie die grundeingestellten Beschriftungen wieder her.

Wenn Sie auf den Knopf "**Versuchs-Ergebnisse**" in der obigen Auswahlbox klicken, erhalten Sie die folgende Dialogbox, in der Sie die Beschriftung der Tabelle der Versuchswerte und Auswertungsergebnisse auf dem Formblatt bearbeiten können:

The dialog box titled "Versuchs-Ergebnisse" contains the following settings:

Einstellungen: Tabelle Versuchs-Ergebnisse

- Zeile 1: Versuch-Nr.
- Zeile 2: Normalspannung [kN/m²]
- Zeile 3: Meßuhrablesung [mm]
- Zeile 4: Kompressionsbeiwert [-]


Buttons: OK, Abbruch, zurücksetzen

Wenn Sie in der Dialogbox Zeilen deaktivieren, werden diese Texte in der Tabelle auf dem Formblatt nicht dargestellt. Um die Tabelle als Ganzes auszublenden, müssen Sie das Element über den Menüeintrag "**Formblatt / Versuchs-Ergebnisse**" deaktivieren (siehe Abschnitt 6.4.11).

Wenn Sie die Auswertung über Steifemodule gewählt haben, können Sie die Beschriftung der Eingabefelder für die Grunddaten und die Tabellendarstellung der Grunddaten auf dem Formblatt bearbeiten. Dazu klicken Sie in der obigen Auswahlbox auf den Knopf "**Tabelle Grunddaten**".

6.4.4 Menüeintrag "Ränder"

In der Grundeinstellung des Programms wird das Formblatt mit Schneidkanten dargestellt. Bei der Ausgabe auf einem DIN-A4-Drucker ist dann im Allgemeinen eine Verkleinerung der Druckausgabe erforderlich, da handelsübliche Drucker ein DIN-A4-Blatt nicht vollständig bedrucken können. Die Einstellung der Blattränder nehmen Sie in der folgenden Dialogbox vor.

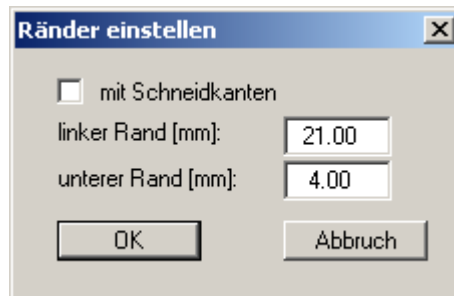


Durch Deaktivieren des Schalters "**mit Schneidkanten**" und entsprechende Wahl des linken und des unteren Randes gelingt es im Allgemeinen, eine nicht verkleinerte Druckausgabe zu erzeugen. Parallel dazu müssen Sie die Blatthöhe und die Blattbreite anpassen (siehe Abschnitt 6.4.2).

6.4.5 Menüeintrag "Info zu Position"

Über die folgenden Menüeinträge können Sie die Positionen und die Layouts der einzelnen Elemente Ihres Ausgabeblattes beeinflussen. Dieser Menüeintrag informiert Sie über die Möglichkeit, Änderungen von Position und Layout auf schnellerem Wege über die Maus durchzuführen.

6.4.6 Menüeintrag "Titel (Position ändern)"

Über die Dialogbox dieses Menüeintrages können Sie Position und Layout des Titel-Elements verändern, wenn der Schalter "**Titel darstellen**" aktiviert ist.

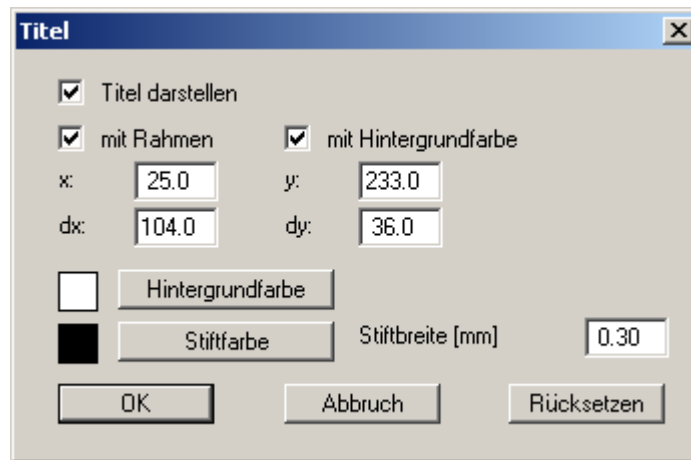

Mit den Werten für "**x**", "**y**", "**dx**" und "**dy**" definieren und verändern Sie die Größe des Elements und die Lage auf dem Ausgabebblatt. Sie können das Element mit einem Rahmen und Hintergrundfarbe entsprechend Ihrer Vorstellungen gestalten. Falls Sie das Element in seinen voreingestellten Zustand zurückbringen möchten, klicken Sie auf den Knopf "**Rücksetzen**". Alternativ können Sie die Größe und Form des Elements auch mit der Maus verändern (siehe Menüeintrag "**Formblatt / Objekte verschieben**", Abschnitt 0).

Die im Titel-Element dargestellte Überschrift "**Druck-Setzungs-Versuch**" können Sie über den Menüeintrag "**Formblatt / Texte**" Knopf "**Formblatt**" ändern (siehe Abschnitt 6.4.3). Die Texte "**Vorhaben (1. Zeile)**" und "**Vorhaben (2. Zeile)**" geben Sie direkt nach Doppelklick auf das Element oder über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Allgemein**" ein (siehe Abschnitt 6.2.6).

6.4.7 Menüeintrag "Drucksetzungs-Kurve"

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie unter Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben (siehe Abschnitt 6.4.6). Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elementes "**Drucksetzungs-Kurve**" vornehmen möchten.

6.4.8 Menüeintrag "Steifemodul-Kurve"

Der Menüeintrag ist nur sichtbar, wenn Sie die Versuchsauswertung über *Steifemodule* gewählt haben. Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie unter Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben (siehe Abschnitt 6.4.6). Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elementes "**Steifemodul-Kurve**" vornehmen möchten.

6.4.9 Menüeintrag "Kompressions-Kurve"

Der Menüeintrag ist nur sichtbar, wenn Sie die Versuchsauswertung über *Kompressionsbeiwerte* gewählt haben. Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie unter Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben (siehe Abschnitt 6.4.6). Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elementes "**Kompressions-Kurve**" vornehmen möchten.

6.4.10 Menüeintrag "Grunddaten"

Der Menüeintrag ist nur sichtbar, wenn Sie die Versuchsauswertung über *Steifemodule* gewählt haben. Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie unter Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben (siehe Abschnitt 6.4.6). Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elementes "**Tabelle Grunddaten**" vornehmen möchten.

Die Eingaben für dieses Element können Sie über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Grunddaten**" ändern (siehe Abschnitt 6.2.1). Sie haben für dieses Element zusätzlich die Möglichkeit, die Texte vor den Eingabefeldern an Ihre Vorgaben anzupassen. Dazu gehen Sie in den Menüeintrag "**Formblatt / Texte**" Knopf "**Tabelle Grunddaten**" (siehe Abschnitt 6.4.3).

6.4.11 Menüeintrag "Versuchs-Werte"

Der Menüeintrag ist nur sichtbar, wenn Sie die Versuchsauswertung über *Kompressionsbeiwerte* gewählt haben. Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie unter Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben (siehe Abschnitt 6.4.6). Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elementes "**Versuchs-Werte**" vornehmen möchten.

Die Eingaben für dieses Element können Sie über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Versuche**" ändern (siehe Abschnitt 6.2.3).

6.4.12 Menüeintrag "Versuchs-Ergebnisse"

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie unter Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben (siehe Abschnitt 6.4.6). Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elementes "**Versuchs-Ergebnisse**" vornehmen möchten.

6.4.13 Menüeintrag "Symbol-Erläuterung"

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie unter Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben (siehe Abschnitt 6.4.6). Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elementes "**Symbol-Erläuterung**" vornehmen möchten.

6.4.14 Menüeintrag "Firma"

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie unter Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben (siehe Abschnitt 6.4.6). Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elementes "**Firma**" vornehmen möchten.

Die Eingaben für dieses Element können Sie direkt nach Doppelklick auf das Element oder über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Firma**" ändern (siehe Abschnitt 6.2.7).

6.4.15 Menüeintrag "Prüfungs-Nr. usw."

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie unter Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben (siehe Abschnitt 6.4.6). Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen am Element "**Prüfungs-Nr. usw.**" vornehmen möchten.

Die Eingaben für dieses Element können Sie direkt nach Doppelklick auf das Element oder über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Allgemein**" ändern (siehe Abschnitt 6.2.6). Sie haben für dieses Element zusätzlich die Möglichkeit, die Texte vor den Eingabefeldern an Ihre Vorgaben anzupassen. Dazu gehen Sie in den Menüeintrag "**Formblatt / Texte**" Knopf "**Formblatt**" (siehe Abschnitt 6.4.3).

6.4.16 Menüeintrag "Anlage und Bericht"

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie unter Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben (siehe Abschnitt 6.4.6). Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen am Element "**Anlage und Bericht**" vornehmen möchten.

Die Eingaben für dieses Element können Sie direkt nach Doppelklick auf das Element oder über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Allgemein**" ändern (siehe Abschnitt 6.2.6). Sie haben für dieses Element zusätzlich die Möglichkeit, die Texte vor den Eingabefeldern an Ihre Vorgaben anzupassen. Dazu gehen Sie in den Menüeintrag "**Formblatt / Texte**" Knopf "**Formblatt**" (siehe Abschnitt 6.4.3).

6.4.17 Menüeintrag "Protokoll"

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie unter Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben (siehe Abschnitt 6.4.6). Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elementes "**Protokoll**" vornehmen möchten.


6.4.18 Menüeintrag "Alle zurücksetzen"

Nach einer Sicherheitsabfrage haben Sie über diesen Menüeintrag die Möglichkeit, alle veränderten Elemente des Formblattes wieder in ihre in den Programmvoreinstellungen festgelegte Ausgangslage zu bringen.


6.4.19 Menüeintrag "Objekte verschieben"

Wenn Sie diesen Eintrag wählen, können Sie anschließend mit Hilfe der Maus die verschiedenen Objekte verschieben. Bewegen Sie die Maus über das Objekt Ihrer Wahl. Wenn Sie sich über einem verschiebbaren Objekt befinden, nimmt der Mauszeiger die Form eines Kreuzes an. Drücken Sie jetzt die linke Maustaste und ziehen Sie mit gedrückt gehaltener Taste das Objekt an die gewünschte Position.

Nach Anwahl des Menüeintrages können Sie immer nur ein Objekt mit der Maus verschieben oder dessen Größe verändern.

Möchten Sie mehrere Objekte bearbeiten, können Sie die Funktion auch schneller durch Drücken der **[F11]**-Taste oder des Symbols  aktivieren.

Über diesen Menüeintrag bzw. die Funktionstaste **[F11]** können Sie auch die Größe eines Objektes verändern. Wenn Sie sich nach Aktivierung der Funktion über dem Rahmen eines veränderbaren Objektes befinden, nimmt die Maus die Form eines Doppelpfeils an. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Rahmen, bis das Objekt die gewünschte Größe erreicht hat. Ziehen Sie an einer Ecke, um das Längenverhältnis der Seiten beizubehalten. Wenn Sie an einer Seite ziehen, wird das Objekt höher bzw. breiter.

Mit der **[Back]**-Taste oder durch Klicken auf das Symbol  können Sie die letzte Änderung der Position oder Größe eines Objektes rückgängig machen.

6.5 Menütitel ?

6.5.1 Menüeintrag "Copyright"

Sie erhalten die Copyrightmeldung mit Informationen zur Versionsnummer des Programms.

Über den Knopf "System" erhalten Sie Informationen zu Ihrem Rechner und den Verzeichnissen, mit denen das Programm **GGU-OEDOM** arbeitet.

6.5.2 Menüeintrag "Maximalwerte"

Sie erhalten in einer Infobox Angaben über die im Programm vorgegebene maximale Anzahl an Versuchen .

6.5.3 Menüeintrag "Hilfe"

Es wird die Online-Hilfe zum Programm **GGU-OEDOM** über einen installierten Browser (z.B. MS Internet Explorer) aufgerufen. Die Hilfe-Funktion kann ebenfalls durch Drücken der Funktionstaste [F1] gestartet werden.

6.5.4 Menüeintrag "GGU-Homepage"

Über dieses Menü gelangen Sie zur GGU-Software Homepage: www.ggu-software.com. Informieren Sie sich in regelmäßigen Abständen über neue Programmversionen und *Download*-Angebote.

Wenn Sie automatisch über Neuerungen in unseren Programmen informiert werden möchten, tragen Sie sich bitte für den Newsletter unserer Knowledge-Base auf der folgenden Internetseite ein: <http://kbase.civilserve.com>.

6.5.5 Menüeintrag "GGU-Support"

Über dieses Menü gelangen Sie zum [Support-Bereich](#) auf der GGU-Software Homepage www.ggu-software.com.

6.5.6 Menüeintrag "Was ist neu?"

Sie erhalten Informationen über die Neuerungen in Ihrer Version gegenüber älteren Programmversionen.

6.5.7 Menüeintrag "Spracheinstellung"

Sie können unter diesem Menüeintrag die Sprache (Deutsch oder Englisch) für die Darstellung der Grafiken und der Programmmenüs auswählen. Um englischsprachig zu arbeiten, aktivieren Sie die beiden Schalter "**Dialoge + Menüs übersetzen (translate dialogues, menus)**" und "**Graphiktexte übersetzen (translate graphics)**".


Alternativ können Sie auch zweisprachig arbeiten, z.B. mit deutschen Dialogboxen und Menüs, aber einer Grafikausgabe in Englisch. Das Programm startet immer in der Sprache, in der es beendet wurde.

7 Tipps

Mit den Cursortasten und den [**Bild auf**]- und [**Bild ab**]-Tasten können Sie ein Scrollen des Bildschirms über die Tastatur erreichen. Durch Klicken und Ziehen der Maus bei gedrückter [**Strg**]-Taste aktivieren Sie die Lupenfunktion, d. h. der gewählte Ausschnitt wird bildschirmfüllend dargestellt. Des Weiteren können Sie das Mausrad nutzen, um in die Bildschirmdarstellung rein- oder rauszuzoomen oder diese zu verschieben. Folgende Mausradfunktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Mausrad hoch = Bildschirmausschnitt nach oben verschieben
- Mausrad runter = Bildschirmausschnitt nach unten verschieben
- [**Strg**] + Mausrad hoch = Bildschirmausschnitt vergrößern (ins Bild zoomen)
- [**Strg**] + Mausrad runter = Bildschirmausschnitt verkleinern (aus Bild heraus zoomen)
- [**Shift**] + Mausrad hoch = Bildschirmausschnitt nach rechts verschieben
- [**Shift**] + Mausrad runter = Bildschirmausschnitt nach links verschieben

Wenn Sie mit der rechten Maustaste an einer beliebiger Stelle auf dem Bildschirm klicken, erhalten Sie ein Kontextmenü, das die wichtigsten Menüeinträge beinhaltet.

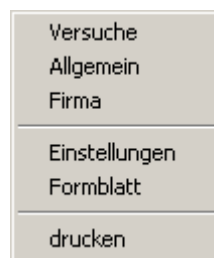

Mit einem Doppelklick der linken Maustaste über Formblatt-Elementen oder Mini-CAD-Objekten, springen Sie direkt in den Editor für das ausgewählte Objekt, um z.B. Eingaben zu ändern. Wenn Sie bei gedrückter [**Shift**]-Taste einen Doppelklick der linken Maustaste über Formblatt-Elementen durchführen, springen Sie in den Editor zur Einstellung von Position, Größe und Aussehen des Elementes.

Einige Funktionstasten sind mit Programmfunktionen belegt. Die Zuordnung ist hinter den entsprechenden Menüeinträgen vermerkt. Die Belegung der Funktionstasten ist im Einzelnen:

- [**Esc**] aktualisiert den Bildschirminhalt und setzt den Bildschirmausschnitt auf das eingestellte Blattformat (DIN A4 oder DIN A3) zurück. Das ist z. B. dann interessant, wenn Sie mit der Lupenfunktion Teilausschnitte der Zeichnung auf dem Bildschirm dargestellt haben und schnell zur Gesamtübersicht zurückkehren wollen.
- [**F1**] ruft die Online-Hilfe auf.
- [**F2**] aktualisiert den Bildschirm, ohne den Bildausschnitt zu verändern.
- [**F11**] ruft den Menüeintrag "**Formblatt / Objekte verschieben**" auf.

8 Index

- A**
- Achseinteilung, Normalspannung..... 19
Achsenkalierung, Auswertungsdiagramme..... 19
Anlagennummer, eingeben..... 17
Anlagennummer, Element bearbeiten..... 27
ASCII-Datei, exportieren..... 10
ASCII-Datei, importieren..... 10
Auswertungsdiagramme, Achsenkalierung..... 19
- B**
- Belastungslinien, Stifteinstellung 20
Bereich kopieren/drucken..... 12, 21
Berichtnummer, eingeben..... 17
Berichtnummer, Element bearbeiten 27
Blattgröße, definieren..... 22
Blattränder, definieren..... 24
- C**
- CodeMeter-Stick..... 4
- D**
- Datei, laden/speichern 9
Drucken, Ausschnitt 12
Drucken, Grafik..... 11
Drucken, mehrere Dateien..... 13
Drucker, einstellen..... 10, 11
Druck-Setzung,
 Kurvendarstellung aktivieren 18
Druck-Setzung, Kurven-Element bearbeiten 25
Druck-Setzung,
 Protokolldarstellung aktivieren 27
DXF-Datei, exportieren..... 11
DXF-Datei, importieren..... 4
- E**
- Einbauhöhe, für Kompressionsbeiwert-
 Auswertung eingeben..... 16
Einbauhöhe, für Steifemodul-Auswertung
 eingeben 14
Einbauhöhe, für Steifemodul-Berechnung..... 6
EMF-Format..... 12
- F**
- Farbe, Stifte Belastungslinien..... 20
Firma, Adresse eingeben 17
Firma, Element bearbeiten..... 27
Formblatt, alle Elemente auf
 Programmvorgaben zurücksetzen 27
Formblatt, Bezeichnung ändern..... 22
Formblatt, einzelne Elemente auf
 Programmvorgaben zurücksetzen 25
Formblatt, Position/Größe einzelner
 Elemente mit Maus ändern..... 24, 28
Formblatt, Titel-Element bearbeiten..... 25
Funktionstasten..... 30
- G**
- GGUCAD-Datei, exportieren 12
GGU-CONSOLIDATE 8
GGUMiniCAD-Datei, exportieren 12
Grafik, über Mini-CAD einbinden..... 21
Grunddaten, für Kompressionsbeiwert-
 Auswertung eingeben..... 16
Grunddaten, für Steifemodul-Auswertung
 eingeben 14
Grunddaten, Tabellen-Element bearbeiten 26
- I**
- Installation 4
- K**
- Knowledge-Base..... 29
Kompressionsbeiwert-Auswertung,
 Versuchsdaten eingeben/ändern..... 16
Kompressionsbeiwerte, Auswertungsgrundlage . 7
Kompressionsbeiwerte, Kurvendarstellung
 aktivieren..... 18
Kompressionsbeiwerte, Kurven-Element
 bearbeiten..... 26
Kompressionsbeiwerte, Protokolldarstellung
 aktivieren..... 27
Kontextmenü 30
- L**
- Layout, Ausgabeblatt..... 22
Lizenzschutz..... 4
Lupenfunktion 20, 21, 30
- M**
- Marker, Einstellungen ändern..... 18
Mausradfunktionen..... 30
Metadatei, exportieren 12
Mini-CAD, anwenden 21
Mini-CAD-Datei, exportieren..... 12
- N**
- Normalspannung, Achseinteilung wählen 19
- P**
- Porenzahl, Kurvendarstellung aktivieren..... 18
Porenzahl, Protokolldarstellung aktivieren..... 27
Probendaten, eingeben..... 17
Probendaten, Element bearbeiten 27
Probendaten, Texte Eingabefelder ändern 23
Probendurchmesser, eingeben 14
Programm, Einstellungen 22

Programm, Informationen.....	29
Programm, Maximalwerte	29
Programm, Neuerungen.....	29
Projektdatei, eingeben	17
Projektdatei, Element bearbeiten	25
Protokoll, Tabellen-Element bearbeiten	27

S

Schneidkanten, ein-/ausblenden	24
Schriftart, wählen	20
Schriftgröße, für Projektdatei einstellen	20
Schriftgröße, für Versuchsnummern in Grafik einstellen.....	18
Scrollen des Bildschirms	30
Setzungen, Darstellung einstellen.....	18
Smarticons, Menüeinträge	21
Spracheinstellung	5, 29
Standardauswertung.....	6
Statusleiste Hauptprogramm, aktivieren	21
Steifemodul-Auswertung, Versuchsdaten eingeben/ändern	15
Steifemodule, Auswertungsgrundlage	6
Steifemodule, Kurvendarstellung aktivieren	18
Steifemodule, Kurven-Element bearbeiten	25
Steifemodule, Protokoll Darstellung aktivieren..	27
Stifteinstellung, Belastungslinien	20
Symbol-Erläuterung, Legenden-Element bearbeiten	26
Symbolleiste, Menüeinträge	21
Systeminformationen.....	29

T

Tabelle Grunddaten, Beschriftung ändern	24
---	----

Tabelle Versuchs-Ergebnisse, Beschriftung ändern.....	23
True-Type-Font	20

U

Übersetzung.....	29
------------------	----

V

Versuche, alle löschen	17
Versuchsauswertung, Art wählen	9
Versuchsdaten, als ASCII-Datei ausgeben	10
Versuchsdaten, als ASCII-Datei importieren....	10
Versuchs-Ergebnisse, Beschriftung in Tabelle ändern.....	23
Versuchsnummer, Beschriftung aktivieren.....	18
Versuchs-Werte, Tabellen-Element bearbeiten	16, 26
Versuchswerte/-ergebnisse, in Infobox darstellen	16
Versuchswerte/-ergebnisse, Tabelle-Element bearbeiten.....	26

W

Wassergehalt, eingeben	14
Wertepaare, eingeben/löschen	15
What you see is what you get	19

Z

Zeitsetzungsberechnung	8
Zoomfaktor, für Vollbilddarstellung definieren	19
Zwischenablage	12